

イトー ES-4000

ES-4000

ここまでコンパクトで、複数人治療を実現。
4CH独立操作の電気刺激治療器



4CH独立操作で、複数人の同時治療を実現。それぞれの

Hi-Voltage、MCR、EMS の3つの電気刺激モードを搭載。
ここまでコンパクトなサイズでありながら、
4CH独立操作を実現し、複数人の同時治療を可能にしました。
予めセットされた多彩なプログラムで、
一人ひとりの症状に合わせた治療を同時に行えます。
スペースも時間も有効に使いながら、最適な治療を実現します。




治療例



4CH 独立操作

4CHをそれぞれ独立して使用することができ、各CHで異なるモードの出力が可能です。患者様それぞれの症状に合わせたプログラムを選択し、複数人を同時に治療することができます。

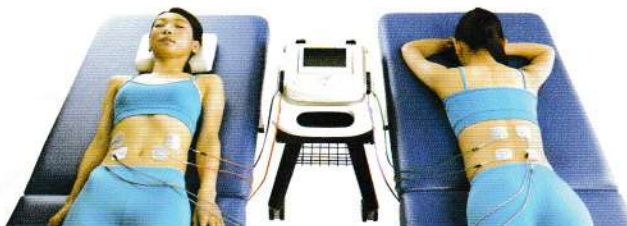

シーケンシャルプログラム

2つのシーケンシャルプログラムには、科学的根拠に基づく治療プログラムが各5種類プリセットされています。設定する手間なく、一人ひとりの症状に合わせたきめ細かな治療が行えます。

Hi-Voltage
+
MCR

EMS
+
MCR

2極グローブ導子 (別売オプション品)

Hi-Voltageモード及び、MCRモードと手技を組み合わせた効率的な施術を行えます。施術者側へ電流が流れることを防ぐ為に、絶縁用のグローブインナーを用意しました。



手元で出力のUP/DOWNが可能

【有線リモコン (別売オプション品)】

有線リモコンにより、本体から離れた場所からでも出力のUP/DOWNが可能です。また、治療中にグローブを外し本体を操作する手間も省け、スムーズな治療が行えます。

ハンディプローブ

切替えスイッチによりタイマーと出力表示を手元ですぐに確認できます。また、スイッチを押している間のみ通電する「モーメンタリ」と押すたびに通電/非通電が切り替わる「オルタネート」の切り替えも可能です。多彩な部位に対応できるように、5種類のハンディ電極を用意しました。



見やすく、快適操作

【大型カラー液晶+可動型タッチパネル】

大型カラー液晶と可動型タッチパネルを搭載し、視認性と操作性を高めました。モードやプログラムの選択から細かな設定まで、タッチするだけで簡単、快適、スムーズに行えます。



消音化を実現した4CH対応吸引装置でさらに快適な治療が可能

快適な治療を追求し、従来の吸引装置と比べて消音化を実現。連続/間欠 (FAST) / 間欠 (SLOW) の3種類の治療モードを搭載し、使用目的に応じて選択することが可能です。



4CH用吸引装置 (N) (SU-4000)

※4CH用吸引装置 (N) (SU-4000) 1台でES-4000の4CH分の吸引が可能です。

超音波治療器との「コンビネーション治療」が可能

超音波治療器 (UST-770、US-777、US-711、US-731) と接続して、多彩な治療を可能にするコンビネーション治療が行えます。

